



Посібник користувача

Електрична зубна щітка

Модель: PT1

Дякуємо, що вибрали серію засобів для догляду за ротовою порожниною компанії «Soocas»: електричну зубну щітку Soocas Aura.

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво та вивчіть правильний спосіб використання електричної зубної щітки Soocas Aura, щоб повністю зрозуміти її ефективність для забезпечення кращого чищення та догляду за здоров'ям ротової порожнини.

Назва продукту: ультразвукова електрична зубна щітка Soocas

Модель: PT1

Вхідна потужність: $5\text{ В} \pm 1\text{ А}$

Час заряджання: 6 годин

Спосіб заряджання: Type-C

Всі вироби, на яких є цей символ, є відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/EU), яке не можна змішувати з невідсортованим побутовим сміттям.

Замість цього ви повинні забезпечити захист здоров'я людей та навколишнього середовища, здавши відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади.

Правильна утилізація та переробка допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь ласка, зв'яжіться з монтажною організацією або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розташування, а також умови та положення, таких пунктів збору.



Зміст

Поради з техніки безпеки	3
Ознайомлення з виробом	4
Керівництво з експлуатації	5
Інструкції щодо заряджання	7
Захист навколишнього середовища	7
Пошук та усунення несправностей	8

Поради з техніки безпеки

* Під час першого використання цього виробу зазвичай відчувається незначний дискомфорт у вигляді кровотечі ясен. Це пов'язано з тим, що ясна ще не зовсім звикли до способу чищення з високим рівнем вібрації. Для початківців рекомендується використовувати делікатний режим, і очікується, що цей дискомфорт триватиме протягом 1-2 тижнів після першого використання. Якщо кровотеча не припиняється більше 2 тижнів, будь ласка, негайно припиніть використання виробу та зверніться за професійною допомогою до свого стоматолога.


Попередження

- Користувачі з корекцією зубів, ремонтом зубів, імплантацією зубів та ін., повинні використовувати цей виріб під керівництвом стоматолога або лікаря.
- Цей виріб відповідає стандартам безпеки для електромагнітних пристроїв. Перед використанням проконсультуйтеся з лікарем або виробником імплантату з питань, пов'язаних з кардіостимуляторами або іншими пристроями, що імплантуються.
- Цей виріб призначений тільки для чищення зубів, ясен та язика. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей. Якщо ви відчуваєте будь-який дискомфорт або біль, будь ласка, припиніть використовувати цей виріб та зверніться за професійною допомогою до стоматолога або лікаря.
- Не занурюйте роз'єм для підключення зарядного пристрою у воду або будь-яку рідину.
- Не підключайте до джерела живлення, якщо на роз'ємі для підключення зарядного пристрою або вилці є рідина.
- Цей виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте його у вогонь та не заряджайте у середовищі з високою температурою.
- Не стукайте по цьому виробу та не кидайте його. Якщо виріб пошкоджено внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
- Не модифікуйте, не розбирайте та не ремонтуйте цей виріб самостійно.
- Цей пристрій не підходить для використання людьми з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також із недостатнім досвідом та знаннями (включно з дітьми), якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або не отримали інструкції від такої особи.
- Не дозволяйте дітям гратися з цим виробом.
- Діти не повинні виконувати очищення та технічне обслуговування без нагляду.
- Для заряджання використовуйте безпечний та сумісний адаптер живлення.

Застереження

- Перед використанням виробу, будь ласка, перевірте його на наявність помітних пошкоджень. Не використовуйте його, якщо він пошкоджений або зазнав серйозних пошкоджень внаслідок падіння.
- Перед заряджанням переконайтеся, що роз'єм для підключення зарядного пристрою та зарядний кабель є сухими; в іншому випадку, це може призвести до ураження електричним струмом або короткого замикання.
- Цей виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, тому не кидайте його у вогонь.
- Не розташовуйте його у місцях з високою температурою або високим рівнем вологості та не допускайте впливу прямих сонячних променів на нього.
- Не використовуйте зарядний пристрій на відкритому повітрі під прямими сонячними променями.
- Не використовуйте зубну щітку, коли ви приймаєте ванну або душ.
- Не дозволяйте іншим особам користуватися насадкою для щітки. Не кладіть металеві предмети на зарядний пристрій, коли він увімкнений.
- Примітка: зображення виробу та приладдя, показані у керівництві, наведені тільки в якості довідкової інформації. У зв'язку з оновленнями та вдосконаленнями виробу фактичний виріб може трохи відрізнятися від зображення. Будь ласка, звертайте увагу на фактичний виріб.
- Цей виріб призначений тільки для побутового використання. Не використовуйте його в комерційних цілях.

Ознайомлення з виробом

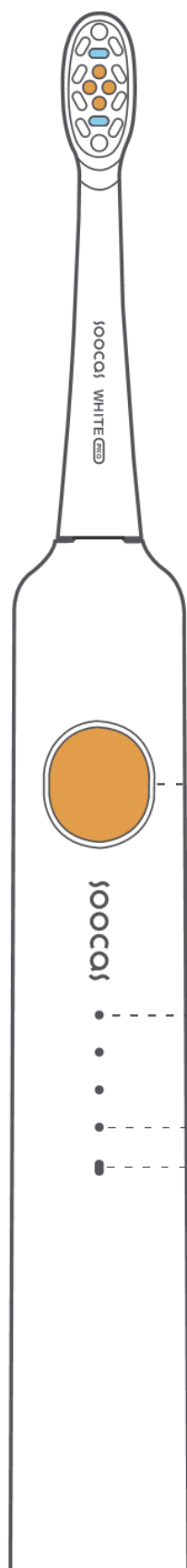

Перемикач живлення

Індикатор режиму


Індикатор нагадування
про рівень заряду
акумуляторної батареї



Насадка для щітки



Дорожній футляр

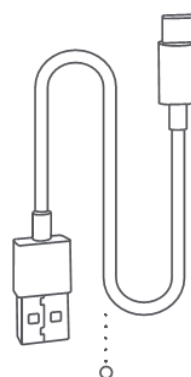


Зарядний кабель

Керівництво з експлуатації


1. Зарядження

- Будь ласка, зарядіть цей виріб перед першим використанням. Будь ласка, використовуйте зарядний адаптер $5\text{ В} \pm 1\text{ А}$.

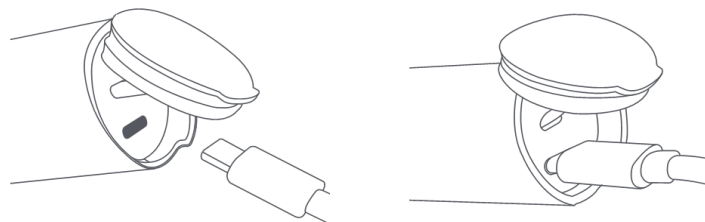

2. Встановлення насадки для щітки

Переконайтеся, що напрямок щетини голівки зубної щітки вирівняно з передньою частиною ручки зубної щітки, а потім обережно встановіть голівку зубної щітки на вал двигуна. Зверніть увагу на те, що між голівкою зубної щітки та ручкою буде невеликий проміжок, щоб зменшити тертя між двома частинами від вібрації двигуна.

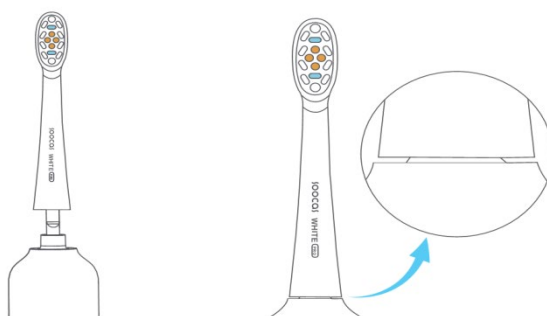

3. Увімкнення/вимикання та призупинення роботи

Функції клавіші

1. Коротко натисніть, щоб запустити пристрій.
2. Коротко натисніть перемикач живлення протягом 15 секунд після запуску, щоб перемкнути швидкість. Коротко натисніть кнопку перемикача протягом 15 секунд після запуску, щоб вимкнути пристрій.
3. У стані запуску: натисніть та утримуйте протягом 2 секунд, щоб призупинити роботу зубної щітки. Якщо протягом 30 секунд не буде виконано жодних дій, пристрій вимкнеться, а якщо протягом 30 секунд ще раз натиснути перемикач живлення, пристрій знову запуститься та продовжить відлік останньої дії після увімкнення пристрою.

Режими чищення

М'який: делікатне чищення, підходить для новачків та користувачів з чутливими зубами

Захист ясен: зручний та потужний, забезпечує захист та покращення здоров'я ясен

Чищення: задовольняє щоденні потреби більшості користувачів

Відбілювання: інтенсивна ефективність очищення, відновлює природний блиск

Полірування: сильні коливання насадки для щітки для забезпечення ефективного очищення від стійких плям

Індикатор нагадування про рівень заряду акумуляторної батареї

Горить червоне світло: низький рівень заряду, вчасно виконуйте заряджання

Блимає червоне або зелене світло: пристрій заряджається


Горить зелене світло: обладнання повністю заряджене

Нагадування про зміну зони чищення


Щітка вібує кожні 30 секунд, щоб призупинити роботу та нагадати про зміну положення чищення.

4. Правильні техніки чищення


1. Повільно проводьте насадку для щітки від зуба до зуба під кутом 40 градусів між щетиною та лініями ясен.

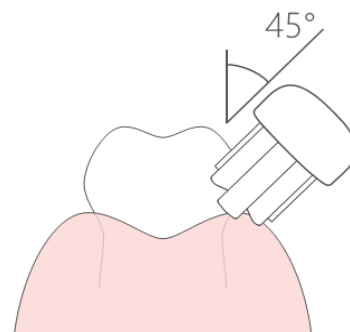

2. Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», щоб вибрати бажаний режим чищення.

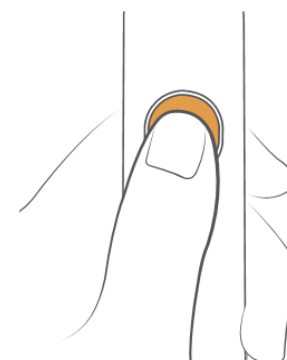

3. Зубна щітка вібрує, показуючи, що користувачеві потрібно почистити нову ділянку рота.

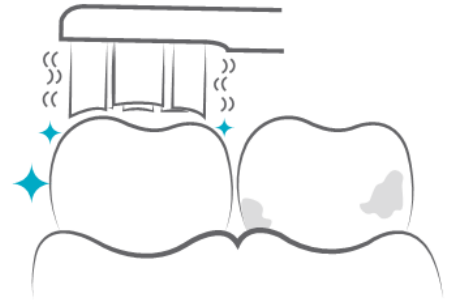

4. Тримайте насадку для щітки близько до зубів, не згинаючи щетину.



Інструкції щодо заряджання

1. Акустична електрична зубна щітка Soocas Aura містить вбудовану акумуляторну батарею, для повного заряджання якої потрібно близько 6 годин. Конкретний час заряджання може відрізнятися в залежності від залишкового рівня заряду та середовища заряджання.
2. Перед заряджанням температура акумуляторної батареї повинна становити 0 ~ 45°C.

Захист навколишнього середовища

Коли термін експлуатації виробу закінчується, згідно з місцевими законами та правилами, перед утилізацією деталей, необхідно виїняти внутрішню акумуляторну батарею та виконати відповідні процедури її переробки та утилізації. Якщо у вас виникли проблеми зі зняттям акумуляторної батареї, будь ласка, утилізуйте виріб згідно з місцевими правилами утилізації відходів.

Попередження


- Не кидайте акумуляторні батареї у вогонь, щоб не допустити вибуху акумуляторної батареї або виділення токсичних та шкідливих речовин.
- Не допускайте короткого замикання акумуляторної батареї, щоб уникнути займання акумуляторної батареї та виникнення пожежі.
- Не знімайте частини виробу, щоб не допустити його пошкодження, за винятком випадків, коли ви бажаєте утилізувати виріб.
- Необхідно дотримуватися суворих правил техніки безпеки. Перед зняттям акумуляторної батареї потрібно вимкнути підключення до джерела живлення.
- Перед утилізацією виробу потрібно зняти акумуляторну батарею з виробу.
- Під час зняття акумуляторної батареї виріб має бути вимкнений.
- Утилізуйте акумуляторні батареї безпечним чином.
- Зняття акумуляторної батареї
 - Використовуйте пласку викрутку, щоб відкрити торцеву кришку ручки.
 - Зніміть кришку та, за допомогою пласкої викрутки, відкрийте внутрішній двигун. Витягніть двигун.
 - Переріжте червоні дроти на внутрішньому двигуні.

1. Вставте пласку викрутку в щілину між задньою кришкою ручки та основним корпусом та підніміть її вгору,

поки задня кришка не відкриється для лівого та правого положення блокування.



2. Притисніть один кінець валу до робочого столу та прикладіть силу у напрямку вниз.

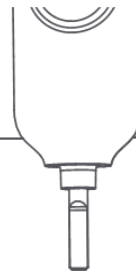


3. Виконуючи 2-й крок, витягніть два симетричних положення фіксації внутрішнього кронштейна за допомогою пласкої викрутки та прикладіть силу у напрямку вниз,


утримуючи корпус пристрою, щоб виштовхнути кришку.



4. Використовуйте діагональні плоскогубці, щоб з силою розрізати його між пластиком та пластиною друкованої плати в точці, показаній стрілкою, поки ніжки для спаювання акумуляторної батареї не будуть розрізані.

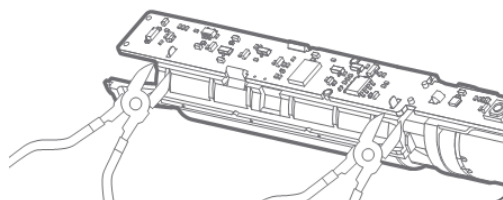

5. Вийміть батарею та передайте її у місце, призначене для переробки.

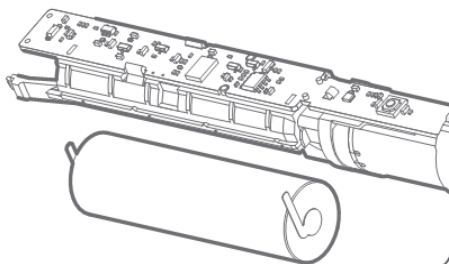

Пошук та усунення несправностей

Питання	Ймовірна причина	Рішення
Неможливо запустити	Вимикається під час заряджання	Припиніть заряджання
Неможливо запустити та червоне світло блимає 3 рази	Занадто низька потужність	Вчасно виконуйте заряджання
Неможливо запустити та червоне світло блимає 6 разів	Занадто висока або занадто низька температура двигуна	Будь ласка, використовуйте щітку при відповідній температурі навколишнього середовища (-20°C ~ 60°C)
Неможливо встановити насадку для щітки	В отворі насадки для щітки є сторонні предмети	Видаліть сторонні предмети з отвору насадки для щітки
	На валу, що обертається, є липкий сторонній предмет	Видаліть липкий сторонній предмет
	Неправильна версія насадки для щітки	Будь ласка, використовуйте правильну версію насадки для щітки
	Напрямок введення змінюється	Будь ласка, дивіться інструкції зі встановлення насадки для щітки
Слабка вібрація насадки для щітки	Насадка для щітки встановлена неправильно	Зніміть та знову встановіть насадку для щітки