



# SKG

Масажер для шиї  
G7Pro-Fold

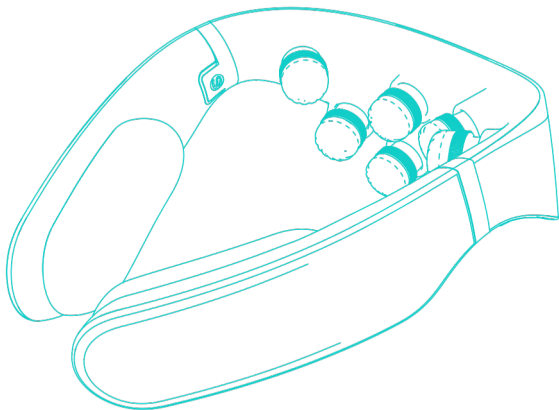

**ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА**

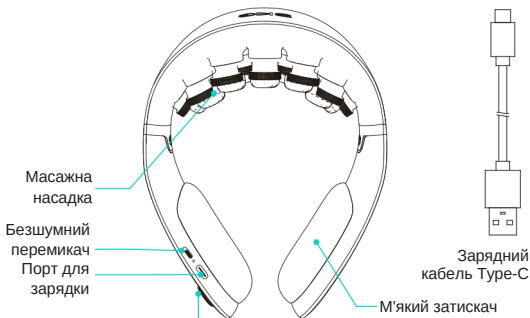

## Інструкції щодо заряджання/живлення



Колір світлодіодного індикатора	Стан світлодіодного індикатора	Опис
Синій колір	Горить постійно	Нормальний рівень заряду батареї
Помаранчевий колір	Горить постійно	Низький рівень заряду батареї
Помаранчевий колір	Миготить	Заряджання
Синій колір	Миготить	Батарея повністю заряджена

## Основні технічні характеристики виробу

Модель	G7Pro-Fold	Номінальна вхідна напруга	5V ---
Ємність акумулятора	2400 мАг / 8,88 Втг	Номінальна вхідна потужність	10W

## Спосіб носіння

- Носіть щільно прилягаючим до шкіри
- Перед використанням промокніть шкіру вологою серветкою

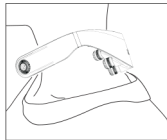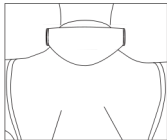

## Щоденний догляд за виробом

UA

- Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.
- Уникайте впливу високої температури та вологості.
- Уникайте розміщення поблизу відкритого вогню.
- Тримайте подалі від твердих предметів, уникайте ударів і подряпин.
- Очищуйте виріб злегка вологою або м'якою тканиною.
- Заряджайте пристрій раз на місяць, якщо він не використовується протягом тривалого часу, і тримайте акумулятор повністю зарядженим під час використання.



## Пошук та усунення несправностей

UA

Якщо виріб не працює належним чином, перевірте наявність наступних умов. Якщо наші рекомендації не допоможуть усунути несправність, будь ласка, поверніть виріб дилеру для ремонту.

Несправність	Можлива причина	Усунення
Не вдається запустити	Низький рівень заряду акумулятора	Зарядіть виріб
	Виріб не вмикається	Тривале натискання кнопки живлення для включення
	Виріб все ще підключений до побутової розетки	Від'єднайте зарядний кабель від пристрою
Не вдається зарядити або індикатор зарядки не відображається	Зарядний кабель неправильно вставлений в розетку живлення	Підключіть зарядний кабель повторно
	Використаний неправильний зарядний кабель	Використовуйте кабель Type-C

Будь ласка, дотримуйтесь правил утилізації акумуляторних батарей (літій-іонних батарей)

 <b>Danger</b>	<p>Акумулятор цього пристрою - це спеціальна акумуляторна батарея, яку не можна використовувати в інших виробках. Не заряджайте акумулятор після його вилучення.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Не кидайте у вогонь і не піддавайте надмірному нагріванню.</li><li>• Не проколюйте цвяхами, не піддавайте сильним ударам і не розбирайте.</li><li>• Не з'єднуйте позитивну та негативну клеми акумулятора безпосередньо з металом</li><li>• Не зберігайте акумулятор разом з намістом, шпильками тощо.</li><li>• Не заряджайте, не використовуйте і не зберігайте в місцях з високою температурою, наприклад, біля плити або під прямими сонячними променями</li><li>• Всі вищезгадані ситуації можуть призвести до перегріву, пожежі або розриву акумулятора.</li></ul>
 <b>Warning</b>	<p>Щоб запобігти випадковому проковтуванню, зберігайте виняту акумуляторну батарею в місцях, недоступних для дітей.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• У разі проковтування негайно зверніться до лікаря.</li><li>• У разі протікання акумулятора не торкайтеся рідини голими руками.</li><li>• Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з безпеки:</li><li>• Існує ризик сліпоти, якщо рідина з акумулятора потрапить в очі. Не трійте очі руками. Негайно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Якщо рідина з акумулятора потрапить на шкіру або одяг, це може спричинити запалення шкіри або травму. Промийте шкіру чистою водою, а якщо симптоми не зникають, негайно зверніться за медичною допомогою.</li><li>• Під час утилізації можна розбирати лише виріб. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або інших нещасних випадків. З питань ремонту (за винятком заміни акумулятора) звертайтеся до продавця, у якого ви придбали виріб.</li></ul>

Літій-іонний акумулятор, що використовується в цьому виробі, є цінним ресурсом, який можна переробити. Перед утилізацією вийміть літій-іонну батарею та передайте її до професійної організації, яка займається переробкою та утилізацією акумуляторних батарей.

- Перед утилізацією пристрою необхідно вийняти з нього акумулятор.
- Перед вилученням акумулятора необхідно вимкнути пристрій.
- Акумулятор слід утилізувати безпечним способом.

#### Кроки вилучення:

1. Відкрийте корпус за допомогою інструменту.
2. Відкрутіть гвинти на друкованій платі.
3. Від'єднайте клеми акумулятора.
4. Вийміть акумулятор.

## **Обережно**

### **Щоб зменшити вплив і можливу шкоду, не використовуйте виріб з наступними медичними електронними пристроями:**

–Імплантовані медичні електронні пристрої, такі як кардіостимулятори.

–Медичні електронні пристрої, що підтримують життєдіяльність, такі як штучні серця та легені.

–Медичні електронні пристрої, такі як електрокардіографи.

- Заборонено використовувати в легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищах, таких як заправні станції, майстерні з високим рівнем запиленості та автозаправні станції.
- Цей виріб не є медичним обладнанням і не діагностує та не лікує захворювання шиї. Пацієнтам із захворюваннями шиї слід проконсультуватися з медичними працівниками, щоб уникнути відкладання лікування.
- Не використовуйте цей виріб під час керування автомобілем, скелелазіння або інших небезпечних видів діяльності, оскільки це може призвести до нещасних випадків.
- Не використовуйте біля серця, над шиєю, на голові, в роті, на ділянках статевих органів або на ділянках зі шкірними захворюваннями, а також уникайте одночасного масажування обох підшов стоп.
- Тривалість гарячого компресу для цього продукту не повинна перевищувати 15 хвилин (будь ласка, уточніть час), оскільки існує ризик низькотемпературних опіків. Не використовуйте під час сну або в несвідомому стані, а користувачам, чутливим до тепла, слід використовувати нижчу температуру і суворо контролювати час використання.
- Особи з порушеннями кровообігу, такими як захворювання судин головного мозку, запалена або набрякла шкіра шиї, нагноєння або хворобливі стани, пов'язані з шиєю, не повинні використовувати цей виріб, оскільки це може погіршити симптоми.
- Зберігайте цей виріб у місцях, недоступних для немовлят, дітей або осіб, які повністю або частково перебувають у несвідомому стані. Не дозволяйте їм користуватися пристроєм, оскільки це може призвести до нещасних випадків.
- Особам старше 70 років заборонено користуватися цим приладом. Будь ласка, оберіть нижчі налаштування і суворо контролюйте тривалість використання, оскільки люди старше 65 років мають більш ніжну шкіру і менш чутливі нервові закінчення.
- Поступово збільшуйте налаштування масажу відповідно до особистого комфорту, інакше дискомфорт від більш високих налаштувань може спричинити м'язове напруження.

## **Попередження**

- Це масажний виріб для особистого догляду і не може використовуватися для заміни ліків або медичних приладів.
- Дітям, вагітним жінкам і жінкам під час менструації заборонено використовувати цей виріб.
- Містить літєву батарею. Не піддавайте її впливу високих температур.
- Використовуйте цей пристрій під наглядом лікаря, якщо у вас чутлива шкіра, алергічний дерматит на обличчі, або на ділянках обличчя, що містять косметичні матеріали.
- Користувачі з алергією на метал або тепло повинні дотримуватися запобіжних заходів.
- Цей виріб оснащений функцією нагрівання; будьте обережні, якщо ви нечутливі до тепла.

- Якщо під час використання виникає дискомфорт, будь ласка, негайно припиніть використання.
- Не розбирайте цей виріб самостійно.
- Не намагайтеся самостійно замінити акумулятор.
- Якщо у вас є травма шиї, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати цей виріб.
- Пристрій має нагрівальну поверхню, тому люди з підвищеною чутливістю до тепла повинні бути обережними під час його використання.
- Використовуйте у звичайному робочому середовищі: температура: від 0°C до 40°C; відносна вологість: <80%RH, без утворення конденсату; атмосферний тиск: від 50 до 106 кПа.
- Будь ласка, обирайте нормальні умови транспортування та зберігання: діапазон температур: від -20°C до +55°C; діапазон відносної вологості: ≤95%RH, без утворення конденсату; атмосферний тиск: від 50 до 106 кПа.
- Цей виріб містить літєву батарею. Не розбирайте, не модифікуйте, не занурюйте у воду і не піддавайте впливу відкритого вогню, оскільки це може призвести до пошкодження або вибуху.
- Не притискайте до серця під час використання, оскільки це може спричинити нещасний випадок або фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте цей виріб з медичними пристроями або з більш ніж двома пристроями одночасно, оскільки це може викликати нудоту або фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте для цілей, відмінних від зазначених в інструкції, оскільки це може призвести до нещасних випадків.
- Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте цей виріб самостійно, оскільки це може призвести до несправності або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте для масажу інших частин тіла, окрім шиї.
- Якщо пацієнт одночасно використовує височастотне хірургічне обладнання та цей масажер, то це може призвести до опіків у місці розташування електродів масажера, а також до пошкодження масажера.
- Якщо цей виріб використовується поблизу короткохвильового або мікрохвильового терапевтичного обладнання (в межах 1 метра), потужність цього масажера може бути нестабільною.
- Під час масажу слід уникати контакту електродних накладок з ранами та шрамами.
- Під час масажу електродні накладки не можна розміщувати поблизу серцевої ділянки грудної клітки, оскільки це може збільшити ризик виникнення фібриляції серця.

**У наступних ситуаціях, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням, інакше можуть виникнути нещасні випадки або дискомфорт:**

- Пацієнти, які наразі проходять медичне лікування і відчувають аномальні фізичні симптоми.
- Пацієнти з інфекційними захворюваннями.
- Пацієнти з алергією на електроди з нержавіючої сталі.
- Пацієнти з аномаліями серця або нервів головного мозку.
- Пацієнти з порушеннями чутливості або аномаліями шкіри.
- Пацієнти з температурою тіла вище 38 градусів за Цельсієм (під час лихоманки).
- Пацієнти, які приймають ліки.
- Пацієнти з аномальним артеріальним тиском.
- Пацієнти, які не можуть вільно висловлювати власну волю.
- Пацієнти з порушеннями сприйняття через серйозні проблеми периферичного кровообігу, спричинені такими захворюваннями, як цукровий діабет.

## У наступних ситуаціях застосування заборонено:

- Пацієнти зі злоякісними пухлинами.
- Вагітні жінки та породіллі.
- Пацієнти з гострими гнійними запаленнями.
- Особи з тяжкими когнітивними порушеннями.
- Особи зі спастичним паралічем.
- Особи з аномальним нервовим стресом.
- Особи у фазі спазму після порушення мозкового кровообігу.
- Особи з затьмареною свідомістю та деформаціями кінцівок і суглобів.
- Пацієнти зі схильністю до кровотеч.
- Користувачі кардіостимуляторів.
- Особи з офтальмологічними проблемами
- Пацієнти з металевими імплантатами.
- Особи з порушеннями згортання крові.
- Поблизу людського серця.

## Примітка

- Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням цього виробу.
- Якщо відчуваєте фізичний дискомфорт через порушення в роботі цього пристрою, будь ласка, негайно припиніть його використання. Зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте незвичні реакції у вашому тілі або на шкірі, і дотримуйтесь рекомендацій лікаря.
- Не робіть масаж разом з електронними пристроями, оскільки це може спричинити несправності (наприклад, збій у роботі електронного годинника).
- У разі виникнення несправності, коли пристрій не може працювати, негайно відключіть живлення і вийміть його, інакше це може призвести до перегріву або короткого замикання, що може спричинити нещасний випадок. Зверніться до служби підтримки для отримання післяпродажної консультації.
- Не підключайте та не від'єднуйте зарядний кабель мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або нещасного випадку.
- Не використовуйте пристрій під час сну, оскільки це може призвести до несправності пристрою і переміщення електродних накладок на інші частини тіла, що спричинить дискомфорт.
- Будь ласка, правильно носіть пристрій на шийному відділі хребта, розміщуючи його симетрично з обох боків, щоб уникнути нещасних випадків або дискомфорту.
- Від'єднуючи зарядний кабель від пристрою, тримайтеся за штекер, а не за кабель, оскільки смикання за нього може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження виробу.
- Заряджайте пристрій відповідно до інструкції з експлуатації під час першого використання або якщо акумулятор розрядився після тривалого зберігання, щоб переконатися, що він функціонує належним чином.
- Після тривалого використання поверхня виробу може нагріватися, це нормально.
- Під час роботи пристрій помірно розминає область шиї; не робіть масаж протягом тривалого періоду часу. Якщо відчуваєте дискомфорт, зробіть перерву перед наступним використанням.
- Не складайте виріб із зусиллям під час використання або зберігання, щоб запобігти пошкодженню його компонентів.
- Під час складання виробу уникайте контакту з волоссям або шкірою, щоб уникнути защемлення.

## **Будь ласка, не використовуйте і не зберігайте цей виріб у:**

Місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів

Сильних електромагнітних полях

Гарячих і вологих місцях

Місцях, схильних до вібрації та ударів

Місцях з джерелами води

Поблизу феєрверків

Місцях з підвищеною запиленістю

### **Рекомендації**

- Перед використанням, будь ласка, переконайтеся, що основні кнопки працюють належним чином.
- Якщо ви використовуєте пристрій вперше або після тривалого зберігання, зарядіть його відповідно до інструкції з експлуатації, щоб переконатися, що він функціонує належним чином.
- Будь ласка, утилізуйте цей пристрій відповідно до чинних міських стандартів захисту навколишнього середовища, щоб запобігти його забрудненню.
- Рекомендовано для використання особам віком старше 16 років.

### **Увага:**

–Якщо ви відчуваєте подразнення шкіри під час використання виробу, будь ласка, утримайтеся від його використання і зачекайте два-три дні, щоб побачити, чи зникнуть ваші симптоми. Якщо симптоми не зникають або погіршуються, зверніться до лікаря.

–Якщо ви страждаєте на екзему, алергію або астму, використання приладу може спричинити подразнення шкіри або алергію.

- Виріб повинен житися тільки від безпечної наднизької напруги, що відповідає маркуванню на корпусі.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки.
- Діти не повинні гратися з приладом.
- Діти не повинні виконувати чищення та технічне обслуговування пристрою без нагляду.

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC (Федеральна комісія зв'язку). Експлуатація здійснюється за умови, що цей пристрій не створює шкідливих перешкод (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені в явній формі стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію обладнання.

**ПРИМІТКА:** Це обладнання було протестовано і визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлене і використовується без дотримання інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній ситуації.

Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або декількох з наведених нижче заходів:

–Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.

–Збільшіть відстань між пристроєм і приймачем.

–Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в іншому контурі, ніж той, до якого підключено приймач.

–Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з радіо- і телетехніки.

Пристрій пройшов перевірку на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в портативному режимі без обмежень.

RSS-Gen Випуск 4 грудня 2014 року"&"CNR-Gen 4e Décembre 2014:

–Українська:

Цей пристрій відповідає стандартам RSS (стандартна специфікація радіооборудованія) Міністерства промисловості Канади, що не потребують ліцензування. Експлуатація здійснюється за таких двох умов: (1) Цей пристрій не повинен створювати перешкод, і (2) Цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

–Французська:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.